

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、
記入捺印していただってください。

販売名 オムロン ねむり時間計 HSL-001

ご芳名

ご住所

TEL

お買い上げ店名



住所

TEL ()

お買い上げ年月日

年

月

日

発売元 **オムロンヘルスケア株式会社**

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地



オムロン健康商品のお問い合わせは

修理のご用命、別売品・消耗部品のお求めも、この電話で承ります。
修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。



オムロンお客様サービスセンター **ダイヤルは正確に**

受付時間 9:00~19:00

月~金（祝日を除く）

都合によりお休みをいただいたり、
受付時間帯を変更させていただく
ことがありますのでご了承ください。

電話 0120-30-6606

通話料無料

FAX 0120-10-1625

通話料無料

ウェルネスリンクサポートデスク

<http://wellnesslink.jp/support/>

お問い合わせの内容によりましては、回答までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

※通話料はお客様ご負担となります。

5334499-7C
HSL-001

取扱説明書

OMRON

SleepDesign lite オムロン ねむり時間計 HSL-001



オムロンの商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

より便利にお使いいただくために、はじめに『スタートアップガイド』をお読みください。

安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

本書は、いつもお手元においてご使用ください。

本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

※本書に記載しているイラストはイメージ図です。

All for Healthcare

WellnessLINK®


はじめに

設定のしかた

使い方

困ったときに・保証など

「ウェルネスリンク」のしくみ

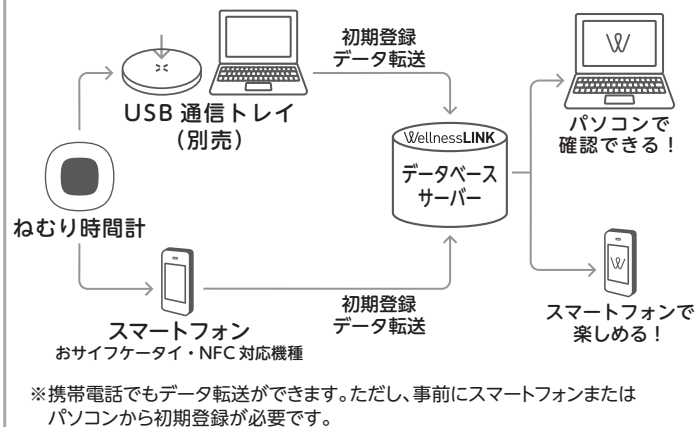

「ウェルネスリンク」で楽しく続く、毎日つながる健康生活

オムロンの「ウェルネスリンク」は、

あなたの健康な毎日をサポートするために生まれたウェブサービスです。

眠りを測定し、あなたの眠り習慣がわかると眠りへの意識が変わってきます。

まずは「ウェルネスリンク」であなたの眠りを知ることからはじめましょう。

サービスの詳細は次のサイトをご覧ください。

<http://wellnesslink.jp/> または「ウェルネスリンク」で検索

目次

はじめに

「ウェルネスリンク」のしくみ	1
次のものが入っていますか？	3
このねむり時計の使い方	4
このねむり時計について	5
安全上のご注意	7
各部の名前	11

設定のしかた

「ウェルネスリンク」に登録する	13
本体で設定する	14

使い方

測定する	18
測定結果を見る	25
電池の寿命と交換	26
お手入れと保管	29

困ったときに・保証など

おかしいな？と思ったら	30
仕様	32
別売品について	33
保証規定	34
品質保証書	裏表紙

次のものが入っていますか？

箱の中には次のものが入っています。
万一、不足のものがありましたら、
オムロンお客様サービスセンター（☎裏表紙）までご連絡ください。


1. 本体



2. お試し用電池（本体に内蔵 2個）



3. 簡易ドライバー

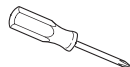

4. スタートアップガイド

5. 取扱説明書（本書：品質保証書付き）

このねむり時間計の使い方

HSL-001 は、このような流れで使います。

①

「ウェルネスリンク」
に登録する



『スタートアップ
ガイド』を
ご参照ください。

※ 本体のみでもお使いいただけます。

☞ 14 ページ

②

測定する

☞ 18 ページ



③

測定結果を見る

■ 本体で見る

☞ 25 ページ



■ 「ウェルネスリンク」で見る

データを転送して
「ウェルネスリンク」で
確認します。
データの転送方法は
『スタートアップガイド』
をご参照ください。




このねむり時間計について

このねむり時間計は枕元に置くだけで、
寝返りなどによる寝具の動きから、
眠りの状態がわかります。
あなたの眠りの状態や
リズムを知ること
で眠りへの意識が変わり、
見直すきっかけにつながります。



眠りの状態

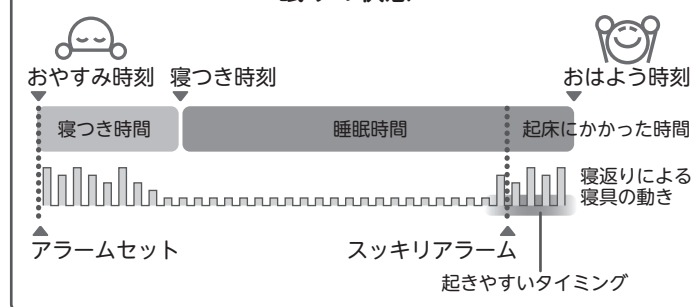

HSL-001 の特長

■ 枕元に置くだけ

身体に器具を装着したり触れたりすることなく、枕元に置くだけで眠りの状態を測定することができます。起きたとき、睡眠時間がすぐに確認できます。

■ 起きやすいタイミングで起こしてくれる

あらかじめセットした時間帯であなたの眠りの状態から、起きやすいタイミングでアラームを鳴らす、スッキリアラームを搭載しています。
アラーム時刻を 7:00 に設定すると、6:30 から 7:00 の間であなたが起きやすいタイミングにアラームを鳴らしてくれます。

「ウェルネスリンク」に登録すると・・・

■ おやすみ・おはよう時刻がわかる

日々のおやすみ・おはよう時刻が確認できるので、眠りのリズムがわかります。あなたの眠り習慣を見直すきっかけにつながります。

■ 眠りの状態がわかる

スマートフォン*のアプリをご利用いただくと、寝つき時間や睡眠時間、起床にかかった時間がひと目でわかります。また、あなたの眠りの状態とあなたの眠りの満足度（スッキリ星）、スヌーズ（ 23 ページ）回数の関係も合わせて確認できます。

*対応機種はウェブサイト「ウェルネスリンク」でご確認ください。また、パソコンでのデータ転送には別売品が必要です。[別売品について]（ 33 ページ）

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について

 **警告** 誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり
物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例



必ず守る

- 記号は強制（必ず守ること）を示します。
（左図は“必ず守る”）



禁止

- 記号は禁止（してはいけないこと）を示します。
（左図は“禁止”）

安全上のご注意

⚠警告

使用にあたって

本商品は睡眠障害等の病気の診断装置ではありません。
自己判断や治療は危険です。必ず医師が専門家の指導を受けてください。

- ・自己判断は健康を害する原因になります。



必ず守る

電池の取り扱いについて

電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。

- ・乳幼児が電池を飲み込む恐れがあります。電池を飲み込んだときは、すぐ医師の治療を受けてください。



必ず守る

電池を加熱したり、火の中に入れたりしないでください。

- ・金属リチウムが溶解して、激しく破裂し、発火します。



禁止

保管について

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

- ・万一、小さな部品を飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。



必ず守る

△注意

使用にあたって

本商品は1人用です。2人以上で使用しないでください。

- ・正しい測定ができません。

測定中は扇風機などの強い風を当てないでください。

- ・正しい測定ができません。

測定中は振動するもの（携帯電話など）をベッドや布団の上に置かないでください。

- ・正しい測定ができません。

畳やフローリングなどの上に直接置かないでください。

- ・正しい測定ができません。

枕や寝具の下に本体を入れないでください。

- ・正しい測定ができません。

強い静電気や電磁波のある場所で使用しないでください。

- ・測定値に誤差が生じたり、故障の原因になります。



禁止

電池の取り扱いについて

電池の⊕⊖極を正しく入れてください。

- ・発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。

指定の電池を使ってください。

新しい電池と古い電池、銘柄や種類の違う電池を同時に使用しないでください。

- ・発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。



必ず守る

△注意

スマートフォン・携帯電話でのデータ転送について

スマートフォンや携帯電話の取扱説明書をよく読んでから使用してください。

- ・故障の原因になります。



必ず守る

通信中は次のものを通信エリアに近づけないでください。

ICカードなど他の通信媒体、金属、磁石など磁界を発生させるもの
通信中に本体の電池を交換しないでください。

- ・故障やデータ破損の原因になります。




禁止

お願い


- ・分解や改造をしないでください。
- ・本体に強いショックを与えたり、落としたり、踏んだりしないでください。
- ・本体は防水ではありません。洗ったり、ぬれた手でさわらないでください。故障の原因になります。
- ・使用済みの電池は、端子⊕⊖をセロハンテープで覆い絶縁してから、お住まいの市区町村の指導に従って処分してください。
- ・本体を廃棄する際は、必ず電池を取り外してから処分してください。

各部の名前

本体

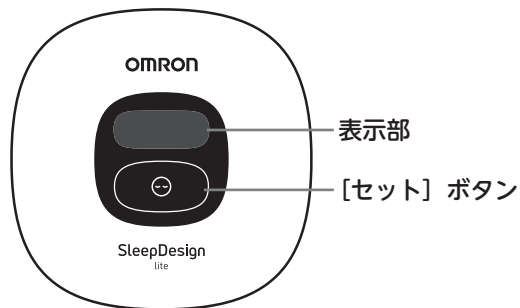


表示部

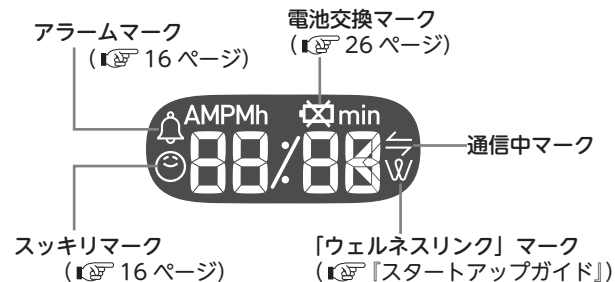

重要 画面は全点灯時の表示内容です。使用中の画面とは異なります。

本体裏面

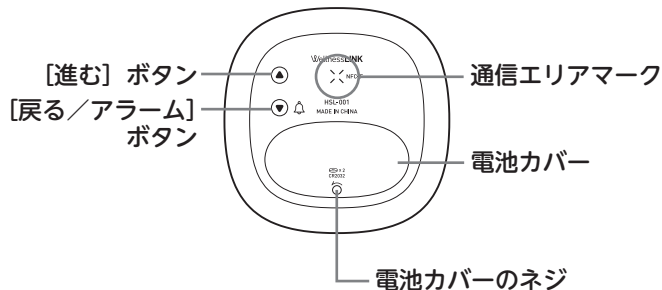

「ウェルネスリンク」に登録する

このねむり時計は、「ウェルネスリンク」に登録することで、ねむり時計の設定や測定記録の管理がおこなえ、さまざまなサービスを利用することができます。

「ウェルネスリンク」への登録方法は、
『スタートアップガイド』をご覧ください。

「ウェルネスリンク」に登録すると、アラーム音の大きさやアラームが鳴り続ける時間、スヌーズの間隔などの変更が可能です。

サービスの詳細は次のサイトをご覧ください。

<http://wellnesslink.jp/>

または「ウェルネスリンク」で検索 

「ウェルネスリンク」に登録せずにねむり時計を使うこともできます。
「本体で設定する」( 14 ページ)

本体で設定する

「ウェルネスリンク」で、初期登録を済まされた方は、
本体での設定は必要ありません。

■初めて設定するときは…


本体裏面の「進む」または「戻る」ボタンを「HELLO」と表示するまで押し続けてください。

西暦年設定表示に変わります。




日付・時刻・アラームを設定する

使用するボタン

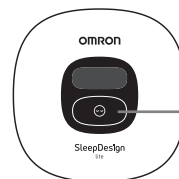

各項目を設定して
次の項目に移る

1 回押すごとに 1 つ進む
(押し続けると早送りする)

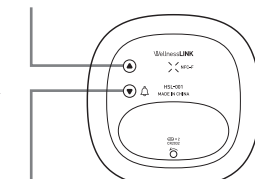

1 回押すごとに 1 つ戻る
(押し続けると早戻しする)

 参考 設定途中に 15 分以上放置すると、ご購入時の状態に戻ります。

重要 正しく設定してください。
設定を間違えると正しく測定できない場合があります。
また、「ウェルネスリンク」をご利用の場合、日付の設定を間違えるとデータ転送の際に測定記録が上書きされたり、消えたりすることがあります。

1 「日付」を設定する

「西暦年」「月」「日」を設定します。

「進む」または「戻る」ボタンを押して合わせ、
「セット」ボタンを押して設定します。



2 「時刻」を設定する

「時」「分」を設定します。

「進む」または「戻る」ボタンを押して合わせ、
「セット」ボタンを押して設定します。



重要 「ウェルネスリンク」にデータ転送をおこなったとき、正確な時間に合わせるために、時刻が補正されます。
詳しくは、ウェブサイト「ウェルネスリンク」のヘルプをご参照ください。

睡眠時間を測定するには、アラームの設定が必要です。

3 「アラーム種類」を設定する

「アラーム」「スッキリアラーム」を選びます。

「進む」または「戻る」ボタンを押して選び、
「セット」ボタンを押して設定します。



… アラーム



… スッキリアラーム

■ スッキリアラームについて

設定したアラーム時刻の 30 分前（初期設定）からアラーム時刻までの間で、あなたの眠りの状態から、起きやすいタイミングにアラームを鳴らします。

「ウェルネスリンク」に登録すると、アラームが鳴っても良い時間幅を 10 分から 60 分（10 分間隔）で設定できます。

4 「アラーム時刻」を設定する

「時」「分」を設定します。

「進む」または「戻る」ボタンを押して合わせ、
「セット」ボタンを押して設定します。



本体で設定する

時刻表示になります。



これですべての設定が終わりました。

アラームを変更する

[セット] ボタンを押して画面を表示させてから、[戻る／アラーム] ボタンを長押ししてください。アラーム設定表示になりますので、「本体で設定する」の手順3（ 16 ページ）から操作し、設定してください。



重要 データ転送すると、同時に「ウェルネスリンク」で設定した内容がねむり時計に反映されます。ただし、アラームの種類とアラーム時刻の設定は、「ウェルネスリンク」あるいは機器で設定された最新の情報に更新されます。

参考 変更中に5分以上放置すると、それまでの変更分は反映されず、もとに戻ります。

日付・時刻を変更する

電池をいったん抜いて約10秒経過してから電池を入れ直し、「本体で設定する」の手順1（ 15 ページ）から操作し、設定してください。



測定する

正しい測定のしかた

枕元に置く


設置推奨エリア

グレー部分のエリアに置くことをおすすめします。

設置可能エリア

斜線部分のエリアに置いた場合でも測定は可能です。

※ただし、環境によって、正確に測定できない場合があります。

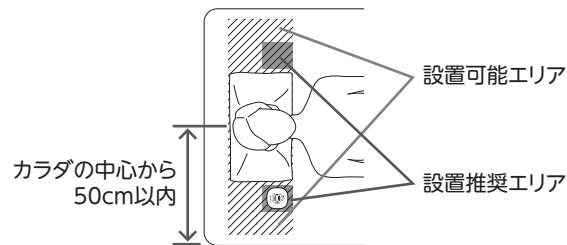

重要

- カラダの中心から50cm以内に置いてください。
- 初めてお使いになるときや環境が変わったときは、テストモードで動作の確認をしてください。「テストモード」（ 19 ページ）

テストモード

寝具によっては寝返りなどによる寝具の動きがうまく測れない場合があります。
次の手順で確認してください。

① [進む] と [戻る] のボタンを同時に長押しする

「CHEK」と表示し、テストモードを開始します。

CHEK

② 枕元に置く

「正しい測定のしかた」(P.18 ページ) を参考に本体を枕元に置いてください。

③ 寝返りをする

仰向けの状態から横を向くなど、寝返りをしてください。
「ピピピピピ・・・ッ」と鳴ったら測定可能です。
音が鳴らない場合は、本体をカラダに近づけるなど本体を置く位置を変更してください。
「正しい測定のしかた」(P.18 ページ)
音が鳴るまでテストモードを繰り返してください。



- テストモードは、開始から3分後に自動的に解除されます。
また、[セット] ボタンを押しても解除できません。
- テストモード中は、アラームや日付・時刻の変更ができません。

測定をはじめる

1 [セット] ボタンを押す

現在時刻を表示します。

2 現在時刻を表示している間に
[セット] ボタンを長押しする

「ピピッ」と鳴るまで押し続けます。

「SLEEP」と表示し、測定開始をお知らせします。

3 枕元に置く

「正しい測定のしかた」(P.18 ページ)を参考に本体を枕元に置いてください。

4 眠る



- 測定中はアラームや日付・時刻の変更ができません。
また、テストモードも開始できません。
- 時刻を確認したいときは、[セット] ボタンを押してください。
「SLEEP」の後、現在時刻を表示します。
さらに [セット] ボタンを押すとアラーム時刻を表示します。



正確に測定できない場合がある使い方

本商品は寝返りなどによる寝具の動きを測定し睡眠状態を判定しているので、眠っていないくても安静にしていると「睡眠」と判定されることがあります。

次の場合は正確に測定できないことがあります。

- ・本体が敷布団から落ちたとき
- ・本体とカラダの距離が離れ過ぎたとき
- ・本体がカラダに接触した状態のとき
- ・本体がカラダの下敷きになっていたとき
- ・本体をポケットに入れるなど、装着して使用していたとき
- ・本体が不安定な場所に置かれていたとき
(他のものと重なって置かれたとき)
- ・ペットと寝ていたとき
- ・2人以上で寝ていたとき
- ・ソファ、畳、フローリングなど寝具でない環境で寝ていたとき
- ・扇風機など強い風が本体にあたったとき
- ・本体の近くに振動するものを置いたとき
- ・「正しい測定のしかた」(P.18 ページ)からはずれた位置に置かれていたとき
- ・カラダがほとんど沈み込まないマットレスや布団を使用していたとき (たたみベッドやフローリングの上に薄い布団など)

アラームを停止する

1 [セット] ボタンを押す

アラームはいったん停止しますが、スヌーズ機能によりしばらくすると再び鳴り出します。

測定を終了すると、スヌーズ機能は解除します。

■ スヌーズ機能について

アラームをいったん止めてもしばらくすると再び鳴り出す機能です。最初のアラームから約 60 分間繰り返します。測定を終了すると、スヌーズ機能は解除します。(▶ 23 ページ)

また「ウェルネスリンク」でスヌーズ機能の間隔を変更することができます。

測定を終了する

1 [セット] ボタンを押す

「SLEEP」の後、現在時刻を表示します。

2 現在時刻を表示している間に
[セット] ボタンを長押しする

「ピーッ」と鳴り、測定を終了します。

スヌーズ機能を解除します。

重要 アラームが鳴る前に起きた場合も測定を終了してください。

睡眠時間の後、現在時刻を表示します。



測定終了時刻がおはよう時刻になります。

■ 睡眠時間について

睡眠時間は、寝つき時刻からおはよう時刻までの時間です。

夜中にトイレや水分補給などで起きた時間も、睡眠時間に含まれます。


次の場合、睡眠時間の測定はできません。

- ・寝つき時刻が判定できなかった場合
一定時間、寝具の動きが検出されなかったときを寝つき時刻と判定し、睡眠時間の測定を開始します。寝つき時刻判定前にアラーム時刻になったり、測定を終了すると寝つきの時刻の判定ができないため、睡眠時間を測定できません。
- ・おはよう時刻を確定できなかった場合
アラームを一度も停止しなかった場合や測定終了の操作をおこなわなかった場合はおはよう時刻を確定することができないため、睡眠時間を測定できません。

測定を終了したら、データ転送しましょう。
データ転送のしかた (▶ 『スタートアップガイド』)

測定結果を見る

〔セット〕 ボタンを押すごとに次のように表示内容が切り替わります。

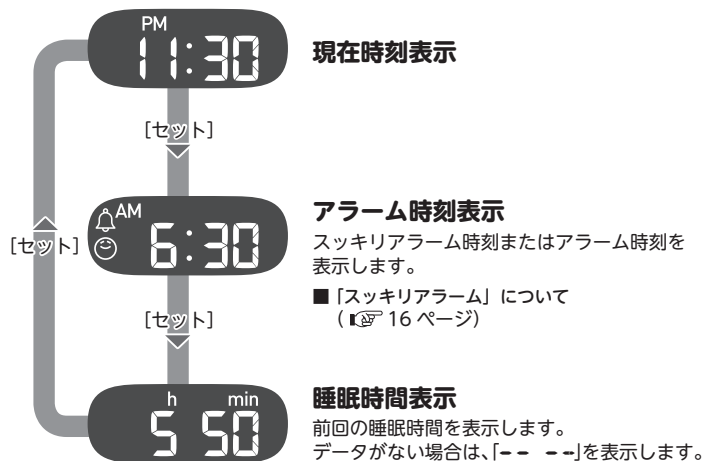

■ 省電力機能について

消費電力をおさえるため、操作をしない状態が 10 秒以上続くと、表示が消えます。

いずれかのボタンを押すと、再び表示します。

表示が消えた状態でも測定しています。

電池の寿命と交換

「」が点滅したら、すみやかに新しい電池 (CR2032 × 2 個) と交換してください。

「」について

点滅	電池残量が少なくなっています。
点灯	電池残量がなくなりました。 測定や転送はできません。

重要

- 電池を交換したときは、日付・時刻・アラームを設定しなおしてください。

「データ転送する」(『スタートアップガイド』)

「本体で設定する」(14 ページ)


- 電池を交換しても、測定記録と設定した値は消えません。

参考 付属の電池はお試し用です。早めに寿命が切れることがあります。

電池交換のしかた


1 電池カバーを外す

付属の簡易ドライバーまたは市販のドライバーでネジをゆるめて、カバーを外します。

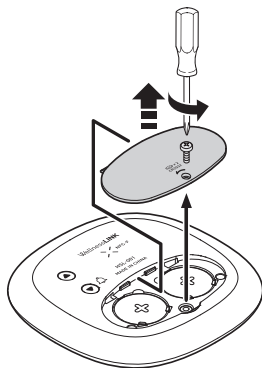

2 電池を取り出す


細くて折れにくい棒（つまようじなど）を差し込み、取り出します。

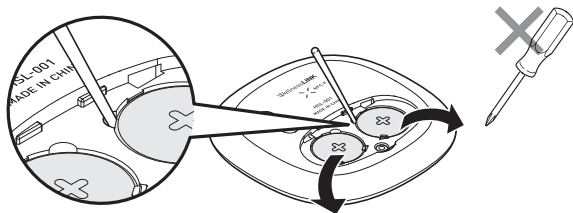

重要 金属製のピンセット、ドライバーなどは使用しないでください。


3 電池を入れる

⊕ を上にして矢印の方向から先に入れます。

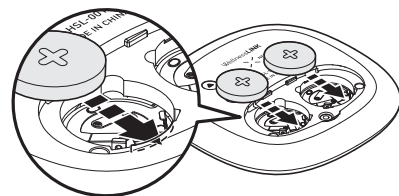

4 電池カバーを閉める

凸部を先に差し込み、ネジを締めます。

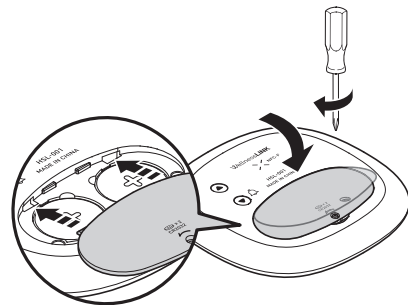

お手入れと保管

お手入れについて

いつも清潔にしてお使いください。

本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませてよく絞ったやわらかい布で、拭き取ります。その後、から拭きしてください。



重要 本体内部に水などが入らないようにしてください。

■お手入れと保管の注意

汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。

次のようなところに保管しないでください。

- ・水のかかる場所
- ・高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
- ・傾斜、振動、衝撃のあるところ
- ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ

乳幼児の手の届かないところに置いてください。

長期間（3カ月以上）ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。



おかしいな？と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
✕が点滅した	電池残量が少なくなっている	すみやかに、新しい電池（CR2032 × 2個）と交換してください（ P.26 ページ）
✕が点灯した	電池残量がなくなった	すみやかに、新しい電池（CR2032 × 2個）と交換してください（ P.26 ページ）
何も表示しない	省電力機能になっている	いずれかのボタンを押してください
	電池の⊕⊖の向きが間違っている	電池を正しく入れ直してください（ P.26 ページ）
表示の値がちがう	電池残量がなくなった	すみやかに、新しい電池（CR2032 × 2個）と交換してください（ P.26 ページ）
	日付や時刻が間違っている	設定を変更してください*
エラー表示が出た Err	動作異常が起きた	電池を入れ直してください（ P.26 ページ）

* いずれかの手順で設定を変更してください。

- ・「ウェルネスリンク」をお使いの方
「ウェルネスリンク」の「機器の設定」で設定を変更してください。
- ・本体のみでお使いの方
「日付・時刻を変更する」（[P.17](#) ページ）

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
√マークが点滅／点灯した	記録した測定値がある一定以上転送されていない	データを転送してください (【図】『スタートアップガイド』)
データの転送ができない	測定中またはテストモード中である	測定を終了する(【図】23 ページ)またはテストモードを解除(【図】20 ページ)してください
	アプリまたは USB 通信ソフトがインストールされていない、または起動していない	アプリまたは USB 通信ソフトをインストール、または起動してください (【図】「ウェルネスリンク」のヘルプ)
	ねむり時間計の通信エリアマークと携帯電話、スマートフォン、USB 通信トレイのマークとが合っていない、または距離が離れすぎている	ねむり時間計と携帯電話、スマートフォン、USB 通信トレイのマークを合わせる、または通信可能な距離まで近づけてください (【図】『スタートアップガイド』)
	強い磁力や電波の発生するものの近くでデータの転送をした	電波の影響を受けない場所で、もう一度データの転送をおこなってください
転送中にエラー表示が出た	通信中マーク 	携帯電話、スマートフォン、パソコンの表示を確認し、指示にしたがってください
表示内容がおかしい／ボタン操作が働かない		電池を入れ直してください (【図】26 ページ)

上記の方法でも直らない場合、商品についてはオムロンお客様サービスセンター、ウェブサービスについてはウェルネスリンクサポートデスクまでお問い合わせください。(【図】裏表紙)

【参考】 本商品の故障、修理のときは、設定した値や当日データを含むすべての測定値はすべて消去されますのでご了承ください。万一に備え測定結果を紙などに記録しておくことをおすすめします。

仕 様

販 売 名	オムロン ねむり時間計 HSL-001
電 源 電 圧	DC6V (リチウム電池 CR2032 × 2 個)
表 示	睡眠時間 23 時間 59 分まで アラーム時刻またはスッキリアラーム時刻 現在時刻
メ モ リ	表示メモリ 1 回分 本体記憶メモリ 最大 14 回分
使用環境温湿度	+ 5 ~ + 35℃・30 ~ 85% RH
電 池 寿 命	約 6 カ月 (1 日 1 回測定) 新品電池使用、当社試験条件による
外 形 寸 法	幅 約 83 × 高さ 約 83 × 奥行き 約 16 mm
質 量	約 64 g (電池含む)
付 属 品	お試し用電池 (CR2032 × 2 個、内蔵)、簡易ドライバー、スタートアップガイド、取扱説明書 (品質保証書付き)

お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

別売品について

別売品のお求めは、オムロンお客様サービスセンター（☎裏表紙）までご連絡ください。

次の別売品をご用意しています。

• USB 通信トレイ

USB 通信トレイを使うとパソコンから簡単にデータの転送ができます。

型式 HHX-IT3



※ USB 通信トレイ（型式 HHX-IT2）は、HSL-001 に対応していません。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下・水没などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。